

„ICH NEHME AM DARMKREBS-FRÜHERKENNUNGSPROGRAMM TEIL“

Ein kleiner Schritt für Sie.
Ein wichtiger Schritt für Ihre Gesundheit.

Häufige Fragen

- **Die Testdurchführung erfolgte nicht genau nach Anweisung (z.B.: es befand sich Urin auf der Stuhlprobe), was soll ich jetzt machen?**

Rufen Sie im Laboratoire Réunis an
Tel: **(+352) 780 290-1**. Dort erhalten Sie weitere Informationen.

- **Muss ich etwas für den Stuhlbluttest bezahlen?**

NEIN, der Test ist für Sie kostenlos.

- **Kann ich den blauen Umschlag auch bei einem anderen Labor abgeben?**

NEIN, Sie müssen ihn entweder per Post schicken oder bei einer Filiale des „Laboratoire Réunis“ abgeben.

- **An wen wird mein Testbefund versendet?**

An Sie selbst, den Arzt, welcher von Ihnen auf dem Identifikationsblatt angegeben wurde, sowie das Koordinationszentrum für Krebs-Früherkennungsprogramme.^{*} Spätestens 15 Tage nach Testauswertung wird der Befund verschickt.

- **Ich habe meinen Test bereits versendet, jedoch vergessen das Formular mit meinen persönlichen Daten beizufügen. Was soll ich tun?**

Rufen Sie so schnell wie möglich beim Hauptsitz der „Laboratoires Réunis“ (Tel.: +352 780 290-1) an und teilen Sie Ihr Anliegen mit. Falls nötig, wird man Ihnen einen neuen Test per Post zuschicken.

^{*} Für weitere Informationen, kontaktieren Sie das:

Centre de coordination des programmes de dépistage des cancers
Ministère de la Santé, Direction de la Santé
Villa Louvigny, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg
Tel : (+352) 247-85641, e-mail : colorectal@ms.etat.lu

Websites: www.plancancer.lu oder www.sante.lu

„ICH NEHME AM DARMKREBS-FRÜHERKENNUNGSPROGRAMM TEIL“

GEBRAUCHSANLEITUNG DER TEST IN 12 SCHRITTEN



Sie finden diese Gebrauchsanleitung auch auf Video unter


www.meintest.lu




WIE FÜHRE ICH DEN TEST DURCH?



- **Entnehmen Sie das Identifikationsformular** aus der Plastiktasche **①** und ergänzen Sie dies mit Ihren persönlichen Daten.

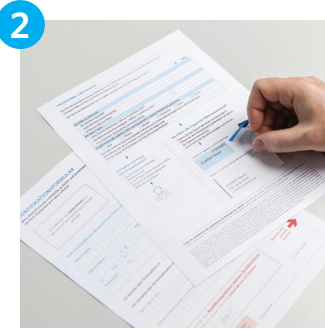

- **Lösen Sie den weißen Etikettenaufkleber** von Ihrem Einladungsschreiben und kleben Sie diesen auf das Identifikationsformular.

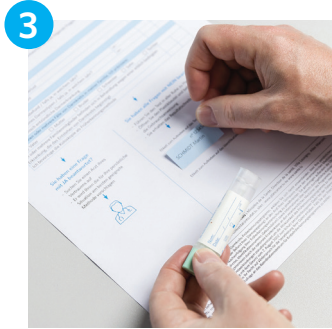

- **Nehmen Sie das Proberöhrchen** aus der Tasche **③**.
- **Lösen Sie das kleine blaue Etikett** von Ihrem Einladungsschreiben und kleben Sie es auf das Proberöhrchen, dort wo "Nom, Date" vermerkt sind.



- **Vergewissern Sie sich**, dass sich nur am eingekerbten Teil des Stäbchens Stuhl befindet.
- **Stecken Sie den Verschluss** mit dem Stäbchen auf das Proberöhrchen.



- **Schütteln Sie nun das verschlossene Teströhrchen** damit sich die Stuhlprobe mit der Flüssigkeit im Gefäß vermischt.



- Vergewissern Sie sich, dass der blaue Etikettenkleber **fest** auf dem Probenröhrchen **klebt**.
- **Umwickeln Sie das Teströhrchen mit dem saugfähigen, grünen Papier** und legen Sie es dann in die **Plastiksenschutzbox**.



- **Entleeren Sie ihre Blase, bevor** Sie den Test machen.
- **Entnehmen Sie anschließend den Stuhlprobenfänger** aus der Plastiktasche **③**. Befestigen Sie diesen, mit Hilfe der Klebestreifen, auf der Toilettenbrille. Drücken sie nun vorsichtig auf die Mitte des Stuhlprobenfängers, um eine kleine Mulde zu formen.
- **Nehmen Sie auf der Toilette Platz** und entleeren Sie ihren Darm.



- **Schrauben Sie das Proberöhrchen auf. Ziehen Sie den Deckel heraus**, an dem sich ein eingekerbtes grünes Stäbchen befindet.



- **Streichen Sie mit dem Stäbchen quer über Ihren Stuhlgang**, bis die eingekerbte Stelle mit Stuhl bedeckt ist.



- **Deponieren Sie die Plastiksenschutzbox** in dem sich Ihr Teströhrchen befindet in **transparenten Plastikschutzbeutel „safety bag“** (Tasche **②**), und verschließen Sie diese fest.



- **Fügen Sie nun das ausgefüllte Identifikationsformular zusammen mit dem „safety bag“**, in welchem sich Ihre Stuhlprobe befindet, in den **blauen Umschlag** (Tasche **②**), auf dem die Adresse des „Laboratoires Réunis“ vermerkt ist und verschließen Sie diesen fest.



- **Versenden Sie den blauen Rücksendeumschlag noch am gleichen Tag.** Falls dies nicht möglich ist, wie am Wochenende oder vor einem Feiertag, bewahren Sie den Umschlag für maximal 3 Tage im Kühlschrank auf.
- Sie können ihn auch direkt bei einem Blutentnahmезentrum der „Laboratoires Réunis“ abgeben (www.labo.lu/centres).